


BurrFix

to cover burr-hole

두개골성형재료 / [B03200. 01 (3)] / 제허 25-509호



- 수술 후 함몰방지
- 모든 사이즈의 catheter 사용가능
- 모든 burr hole case 사용가능
- 부드러운 마감
- 돌출부가 없는 스크류 고정 방식

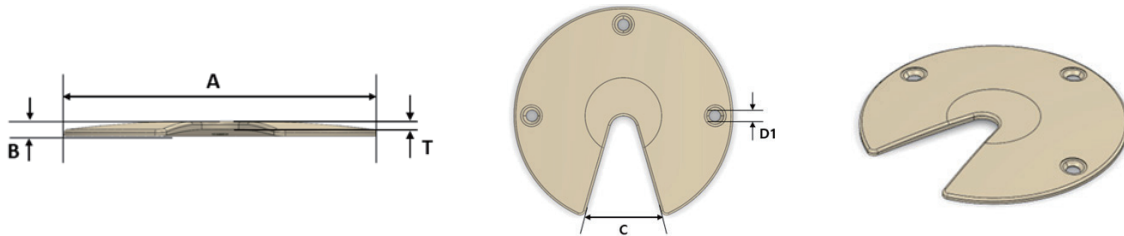


NO	모델명	규격 [단위 : mm]			비고
		A (외경)	B (높이)	C (내경)	
1	AI - P - S (A - B - C)	15 ~ 30	1.21 ~ 1.44	5.5 ~ 10.3	고정홀 개수 : 0 ~ 4개

※ T (두께) : 0.75 mm

※ D1 (고정홀 치수) : Ø 1.6 mm

안전성이 입증된 고성능 생체 접합 물질인 PEEK(ASTM F2026)을 사용

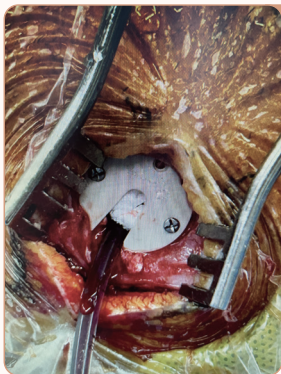

오랜시간동안 안전성을
보장받은 원재료
(PEEK OPTIMA™)

전세계 PEEK OPTIMA™가 이식된 수
: 9백만 건

미국에서만 제작된 PEEK OPTIMA™의료기기
: 500개 이상

임플란트 시장에서의 20년 이상 공급 역사 보유

방사선 투과성, 탄성 계수가
피질골과 유사함

응력 방패 현상 (Stress shielding)의
충격 감소 및 우수한 하중 분배가 가능

우수한 물리적 특성

사출성형, 몰딩, 가공, 압출 등으로
제작 가능

충격 및 마모에 강한 특성을 지닌
열가소성수지

넓은 온도 범위에서의 높은 기계적 강도,
피로 특성을 가짐



주의

-이 제품은 '의료기기'이며, "사용상의 주의사항"과 "사용방법"을 잘 읽고 사용해야 합니다.

-본 제품의 사용되는 의료기기는 별도의 신고/인증/허가 제품이어야 합니다.

-본 제품은 일회용이므로 재사용을 금지합니다.

-보관 시 문제가 발생하거나 발생의 소지가 있을 때에는 제조사로 연락바랍니다.

제조원



ANYMEDI
(주)애니메디칼루션

TEL : 02-6951-1311
FAX : 02-6951-1322 / E-mail : info@anymedi.com
경기도 하남시 테크노밸리 U1 CENTER B동 1508호
www.anymedi.com

판매원



(주)유신메디칼교역
Yushin medical & Trading Co., Ltd.

TEL : 02-3664-4555
FAX : 02-3664-4163
서울시 양천구 목동중앙북로24길 1-28
www.yushinmedical.com

BurrFix

PEEK MILLED IMPLANTS



ANYMEDI
(주)애니메디솔루션



(주)유신메디칼교역
Yushin medical & Trading Co.,Ltd.