

Chest Drain

NERA AQUA COMFORT

Multi Chamber System



제조원

NERA SENKO MEDICAL INSTRUMENT Mfg. Co., Ltd.

11-1, Hamakawado, Kasukabe-shi, Saitama 344-0054 Japan

판매원



(주)유신메디칼교역
Yushin Medical & Trading Co., Ltd.

서울 양천구 목동 중앙북로 24길 1-28 (목동 520-8)
TEL. 02-3664-4555 / FAX. 02-3664-4163

PORT


음압해제포트

배액병 내 음압발생시
음압해제를 위한 포트



샘플포트

샘플 채취용 포트

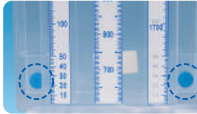

워터셀

워터셀 수위조절포트



VALVE


양압배출밸브

환자측에서 발생한 양압을
대기로 배출



역류방지밸브

돌발적인 음압에 의한
워터셀의 역류 방지

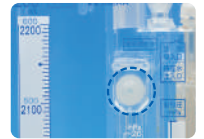

원터치 커넥터

간편하게 탈부착이 가능하여,
배액통만 따로 교환 가능

배액 챔버

투명 재질을 통해 배액된
체액의 확인이 용이

워터셀 챔버

멸균증류수 주입시 파란색으로
변하며, 기흉발생시 확인이 용이함

소음방지 스펀지

챔버 내부에 장착된 스펀지는 흡인기에
의한 기포를 미세하게 분해하여 버블
노이즈를 최소한으로 감소

압력 챔버

멸균증류수 주입시 노란색으로 변하며,
-3 ~ -20hPa 사이로 압력설정가능

