



ALL SILICONE HEMOSTATIC CATHETER (Hematuria)

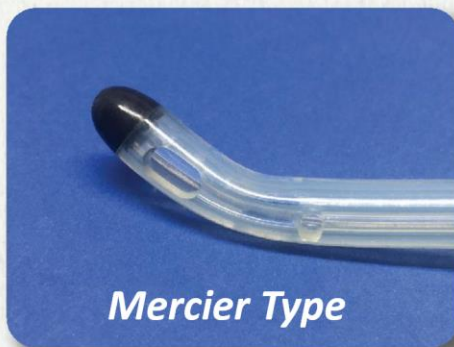

Mercier Type

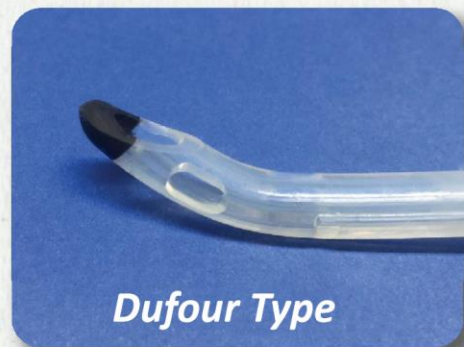

Dufour Type

보험코드 : K5400005

Size (Fr)	Balloon Capacity	Length	Tip Type
18	40 ml	400 mm	Mercier / Dufour
20	50 ml		
22	60 ml		
24	70 ml		

TUR 수술 후 단시간에 지혈 및 세척이 가능하도록 제작하였습니다

커브가 만들어 진 TIP은 Stylet 없이도 방광삽입을 용이하게합니다

수술현장에서 대량세척 또는 Traction을 실시할 때 collapse가 되지 않도록

Catheter의 경도를 강화하였습니다

Balloon의 용량이 커서 압박지혈 시 유리합니다.

100% All Silicone 재질로써 인체에 무해하며, 투명하기 때문에 Catheter 내부의 상태를 육안으로 확인할 수 있습니다.